

目的に応じて選択できる先端ユニット

～ さまざまな部位への効果的な照射が行えます。～

■標準ユニット

●Bタイプ



特 徴：照射部位を変えながら照射する時に使用するスタンダードな先端ユニットです。

出 力：1.9W
照射径：10mm

●Cタイプ



特 徴：広範囲な部位を治療する時に使用します。

出 力：2.5W
照射径：80mm

■オプション

●SGタイプ



特 徴：特定の狭い範囲に照射を集中させたい時に使用します。

出 力：1.3W
照射径：7mm

■製品仕様

一般的名称	： 赤外線治療器
販売名	： スーパーライザー mini PRO
寸法	： 幅290mm×奥行250mm×高さ120mm
重量	： 1.8kg
電気定格	： AC100V、70VA、50/60Hz、DC12V、2.08A
ACアダプタ	： AC100-240V 50/60Hz（出力：11-13Vdc 2.27-1.92A）
使用温度湿度	： +10～+34℃、30～75%RH
定格時間	： 10分
出力	： 2.5W
クラス分類	： クラスII特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	： 231AGBZX00014000



安全に関するご注意

- ご使用前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お問い合わせ販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因となる場合があります。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

Tokyo ken 東京医研株式会社
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>



本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL 042-378-6630

■営業部 TEL 042-318-8324	■名古屋支店 TEL 052-726-8971
■仙台支店 TEL 022-773-3060	■大阪支店 TEL 06-7223-8971
■埼玉支店 TEL 048-615-0800	■中国支店 TEL 082-831-3616
■東京支店 TEL 042-310-0304	■福岡支店 TEL 092-642-7200

お問い合わせ先

2024.01

Tokyo ken

小型軽量赤外線治療器

—SUPER LIZER—
mini PRO

コンパクトながら、
優れた治療効果！



ハイレベルな光線治療を、より手軽に、より身近に。

～スーパーライザーHA-2200シリーズの先進機能や操作性を継承～

＜スーパーライザー mini PRO＞は、ハンドイン治療に特化した小型軽量タイプの光線治療器。

光の中で最も生体深達性の高い近赤外線(0.6 μ m～1.6 μ m)を最高2,500mWでスポット状に照射。


その治療効果はペインクリニックをはじめ、多岐にわたる医療の現場で高く評価されています。

操作性・治療効果・安全性など、さまざまな医療ニーズに高いレベルでお応えします。



1 最高2,500mWの高出力により、さらなる生体深達性を実現。

光学フィルターで生体深達性の高い波長帯(0.6～1.6 μ m)のみを取り出し、光線治療にとって最も効率の良い理想的な構造。最高2,500mWの高出力によって深い患部まで到達し、心地よい温感を与え、より優れた治療効果を発揮します。

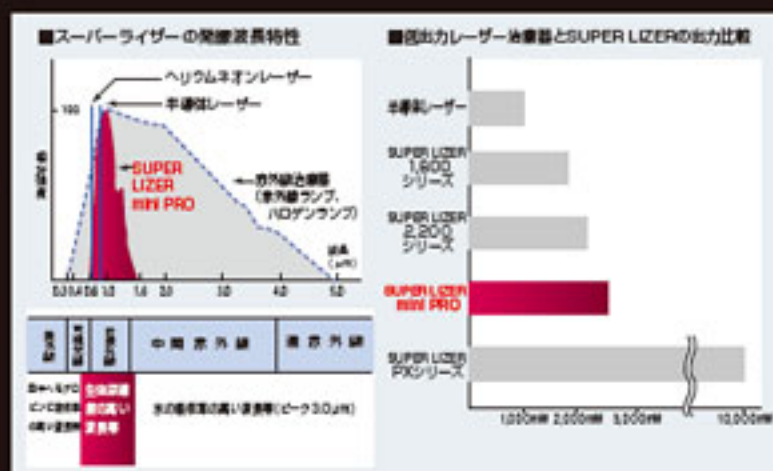

2 シンプルでわかりやすい操作パネル

見やすくレイアウトされたダイヤル式の操作パネルを採用。スーパーライザーHA-2200シリーズの操作性を継承し、使いやすさを追求しています。



3 選べる2つの照射モード

連続・サイクル照射の2つのモードを組み合わせる事により、高い治療効果が期待できます。

4 光源をプローブに内蔵し小型化。高出力での治療を実現

先端ユニットを付け替えて、さまざまな部位にストレスなく照射できます。



動かしながらの照射に
(Bタイプ)



特定範囲の照射に
(SGタイプ)



広い範囲の照射に
(Cタイプ)

SUPER LIZER
mini PRO