

付 属 品

- ダイナトロン709ソラリスプラス本体



- ダブル電極コード (赤・黒)
- コンボ電極コード
- ピンコネクター付粘着電極 (大)
- 5cmサウンドヘッド
- ハイボルト電極
- ハイボルト電極含水部
- 丸型カーボン電極 (赤・黒)
- 丸型カーボン電極含水部 (大)
- バンド
- 専用カート



オプション



■2cm²サウンドヘッド



■10cm²サウンドヘッド



■ライトプローブ



■ライトパッド

仕 様

- タイマー 1～99分
- 干渉波モード・プリモジュレートモード
 - 搬送周波数 4,000～10,000Hz
 - 干渉周波数 0～150Hz
- ロシアンモード・バイフェイジックモード
 - 周波数 1～500Hz
 - パルス幅 ロシアンモード0.4～50mS
 - バイフェイジックモード50～400μS
 - ON/OFFサイクル 10/10秒, 10/30秒, 10/50秒, 連続、カスタム(ON 1～60秒/OFF 1～90秒)
 - 立上り下り時間 0.5秒、1.0秒、1.5秒、2.0秒
 - 刺激モード 連続モード、同期モード、交互モード
- ハイボルトモード
 - 周波数 1～200Hz
 - パルス幅 25μS
 - ON/OFFサイクル 10/10秒, 10/30秒, 10/50秒, 連続、カスタム(ON 1～120秒/OFF 1～300秒)
 - 立上り下り時間 0.5秒、1.0秒、1.5秒、2.0秒
 - 極性切り換え (+)極のみ、(-)極のみ、(+)極と(-)極
 - 出力電圧 1～200V (500Ω負荷)
- マイクロカレントモード
 - 周波数 0.1～200Hz
 - 極性切り換え (+)極と(-)極
 - 出力電流 10～990μA
- 超音波モード
 - 振動周波数 1MHz、2MHz、3MHz
 - デューティサイクル 10%、20%、50%、連続
 - 超音波出力 0.1～2.0W/cm²
- 赤外線モード
 - 高輝度LED 中心波長464nm、624nm、850nm
 - 最大出力 ライトプローブ 1,000mW
 - ライトパッド 5,160mW
- 寸法・重量 110mm(H) 490mm(W) 305mm(D) 3.8kg
- 承認番号 22700BZX00062000
- クラス分類 クラスⅡ 管理医療機器



安全に関するご注意

- ご使用前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。
- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求め販売店または当社営業所へご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

Tokyo ken 東京医研株式会社
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>



本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL 042-378-6630

■営業部 TEL 042-318-8324 ■名古屋支店 TEL 052-726-8971
■仙台支店 TEL 022-773-3060 ■大阪支店 TEL 06-7223-8971
■埼玉支店 TEL 048-615-0800 ■中四国支店 TEL 082-831-3616
■東京支店 TEL 042-318-8334 ■福岡支店 TEL 092-642-7288

お問い合わせ先

2024.01



DYNATRON 709
SOLARIS[®]
PLUS



**1台で6種類の電気刺激と超音波治療、赤外線治療が
同時におこなえるコンビネーション治療器**

1台で6種類の電気刺激と超音波治療、赤外線治療が同時におこなえるコンビネーション治療器

干渉波治療では、治療部位の干渉ポイントを指移動で誘導するターゲットシステムを装備

複合治療が可能なコンビネーション治療

ソラリスプラスは、6種類の電気刺激治療（干渉波治療・ハイボルト治療・ロシアン治療・プリモジュレート治療・バイフェイジック治療・マイクロカレント治療）と、超音波治療・赤外線治療がおこなえます。

6種類の電気刺激治療と超音波治療・赤外線治療は同時に使用でき、コンビネーション治療がおこなえます。


光の3波長を照射する赤外線治療

赤外線治療には、治療部位を移動させるオプションのライトプローブと、固定部位の治療を目的としたオプションのライトパッド(140mm×200mm)があります。ライトパッドは、同時に2部位照射可能で広い範囲を治療できます。



干渉波治療のターゲットシステム

セラピストが容易に干渉波治療ポイントを移動できるシステムで、ターゲットパッドをタッチし治療ポイントを移動できます。スワイプすると電極で囲まれた範囲の70～80%の部位を、渦巻き状に治療ポイントを自動的に移動します。

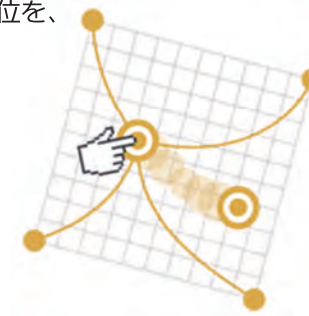

3種類のマルチ周波数超音波治療

サウンドヘッドは治療部位（深さ）により、発振周波数を1MHz,2MHz,3MHzに切り替えができます。発振周波数の切り替えは、操作パネルのスイッチで選択できます。サウンドヘッドは2cm²、5cm²、10cm²のサイズがあり、治療部位によりサウンドヘッドを差し替えて使用できます。

