

SonoCure

付属品

ハンドピースセット	フットスイッチ	SCワゴン	ディスボ 送水吸引チューブ
ディスボ 吸引器用キャニスタ	フィルターチューブセット	滅菌ケース	

※チップ及びチップカバーはオプションです。



ハンドピースセット



ディスボ送水吸引チューブ



ディスボ吸引器用キャニスタ



フィルターチューブセット



滅菌ケース

■仕様

●超音波出力：発振方法／電歪振動、定格発振周波数／25kHz、定格出力／100W ●イリゲーション（送水）：定格流量／40ml/min ●サクション（吸引）：定格圧力／65kPa ●電氣的定格：電源電圧／AC100V、電源周波数／50/60Hz、電源入力／300VA ●寸法・重量：本体／W280×D452×H197mm 13kg

■動物用医療機器承認済み ■販売名：超音波手術器 SonoCure

Tokyo ken 東京医研株式会社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL (042) 378-6630 FAX (042) 378-6614

営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島 2-27-2	TEL (03) 5807-3011
札幌営業所	〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条 2-5-18	TEL (011) 668-1113
仙台営業所	〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢 2-2-3	TEL (022) 773-3060
埼玉営業所	〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 4-12-1	TEL (048) 836-4100
東京営業所	〒113-0034 東京都文京区湯島 2-27-2	TEL (03) 5807-3013
西東京営業所	〒183-0005 東京都府中市若松町 4丁目 3-6	TEL (042) 352-3055
横浜営業所	〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉 4丁目 3-17	TEL (045) 413-5103
名古屋営業所	〒465-0014 愛知県名古屋市中区上三之角 2-1108-3F	TEL (052) 726-8971
大阪営業所	〒570-0045 大阪府守口市南寺方中通 3-12-9	TEL (06) 6995-6301
広島営業所	〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2丁目 14-30	TEL (082) 831-3616
四国営業所	〒761-1703 香川県高松市香川町浅野 332	TEL (087) 815-5155
福岡営業所	〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代 4-29-27-6F	TEL (092) 642-7288

お問い合わせ先

Tokyo
ken



先進技術が可能にした、
動物医療への
新たなアプローチ。

動物用超音波手術器

SonoCure

最先端技術を融合し、 難しい手術をより安全に、低侵襲で。

ペットの高齢化、生活環境の変化に伴い、動物の病気も多様化しており、動物手術にはより専門的な技術が必要とされてきています。

国内初となる動物専用超音波手術器「ソノキュア」は、動物手術における新たな提案です。

組織の破碎・乳化・吸引はもとより、骨の切削などの

高度な手術が安全かつ低侵襲で行え、

手術時の獣医師のストレス、


患者の身体的ダメージを大きく軽減します。

組織の破碎・乳化・吸引、
骨の切削などの手術が低侵襲で行えます。
動物専用器として国内で初登場です。

「ソノキュア」は、超音波領域の周波数で金属チップを振動させ、目的部位を破碎・乳化・吸引、さらに骨の切削などの手術が行えます。その際に血管や神経などの弾力性に富んだ組織を選択的に温存できるため、患者へのダメージを最小限に抑えることが可能です。

チップは回転モーメントがなく、
周りの組織に損傷を与えません。

縦方向(Longitudinal)の振動にねじり(Torsional)の動きを加えることにより破碎力が高く、切削の際の操作性も良好です。神経や血管・硬膜近傍の骨切削に有用です。

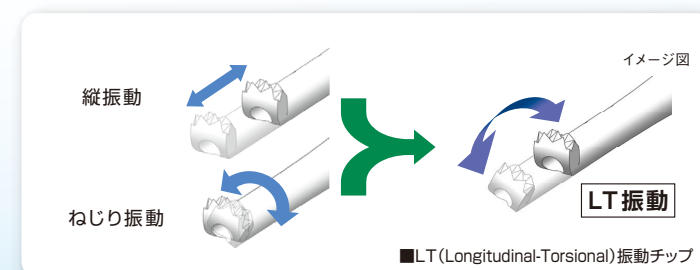

小型軽量・高破碎力のハンドピースを採用。
軟部組織用、骨組織用、
多彩なチップバリエーション。

症状、部位に合わせて先端チップを選択交換することで、効率的な破碎・乳化・吸引が可能です。



すぐれた操作性と洗練されたデザイン。

必要な設定はすべてフロントパネルで行えます。ハンドピース部は、フットスイッチの採用により機敏に作動し、タイムラグを起しません。本体はコンパクト設計、SCワゴンに本体と付属品を省スペースに収納します。



動物用超音波手術器

SonoCure



送水・超音波破碎・吸引のすべてをこの一台で。

「ソノキュア」は、送水・超音波破碎・吸引の駆動機能をすべて本体に装備・内蔵しています。他の付属装置を必要としないオールインワンシステムです。

オールインワンシステム

