

照射例 さまざまな部位に効果的な照射がおこなえる、各種先端ユニットを取り揃えています

SGプローブ



SGプローブ + Cプローブ



ライトPad + ライトPad



EXブルーカクテル光線照射例



スーパーライザーEX
仕様

定格電圧: AC100V、定格周波数: 50/60Hz、電源入力: 207VA、出力波長: 600nm~1,000nm、
定格出力: Bプローブ2.0W・Cプローブ5.0W・CHプローブ5.0W、SGプローブ1.0W・ライトPad5.0W、光源: LED、本体重量: 40kg、
本体寸法: 464mm(W)×464mm(D)×1,368mm(H)、医療機器認証番号: 303AGBZX00082000

EXブルー
(ライトパッドBLUE)仕様

出力波長: BLUE(青色光)464nm、Red(赤色光)630nm、IR(近赤外線)850nm
定格出力: 0.75W、重量: 170g、医療機器認証番号: 30600BZX00184000



安全に関するご注意

●ご使用の前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●定期的に機器の点検を行ってください。

●この機器には電気工事等が必要な場合があります。
お買い求め販売店または当社支店へご相談ください。
工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

SUPER LIZER EX

進化を遂げた究極形態 LEDスーパーライザー



Tokyo
ken 東京医研株式会社
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>

本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL 042-378-6630

■営業部 TEL 042-318-8324 ■名古屋支店 TEL 052-726-8971
■仙台支店 TEL 022-773-3060 ■大阪支店 TEL 06-7223-8971
■埼玉支店 TEL 048-615-0800 ■中四国支店 TEL 082-530-5001
■東京支店 TEL 042-318-8334 ■福岡支店 TEL 092-642-7288



お問い合わせ先

およそ四半世紀の歴史と約30,000台の納入実績を誇る赤外線治療器「スーパーライザー」

過去の知見と技術的研鑽をここに最終進化形態として結実、シリーズ初のLED光源と新波長を採用

1 光源に高精度LEDを採用

発光効率がよく全光束が多い高精度LEDは、応答性に優れ、いかなる環境でも効果が安定します。振動や衝撃に強く、紫外線がほとんど出ないため安全性も保持します。
新たに開発されたLEDプローブでは、生体内で受け取る受光量を従来機の約1.5倍にすることを可能としました。



2 照射部位に合わせた波長帯を採用

SG・B・Cプローブ/ライトパッド


600～1000nmの波長帯を採用。1000nm以上の波長帯をカットし、純粋に生体深達性に優れる波長帯のみを照射できます。

CHプローブ

「照射してすぐ心地よい温かさを感じたい」という声を受けて誕生した、温熱タイプ「CHプローブ」。生体深達性に優れる波長帯はそのままに、温感を発する波長帯(1450nm)を加えています。

EXブルー(ライトパッドBLUE)


青色光(464nm)、赤色光(630nm)、そして近赤外線(850nm)の3種類の波長帯を同時に出力できる「ライトパッドBLUE」が誕生しました。
3種類の波長帯を利用し、幅広い症状にご使用いただけます。

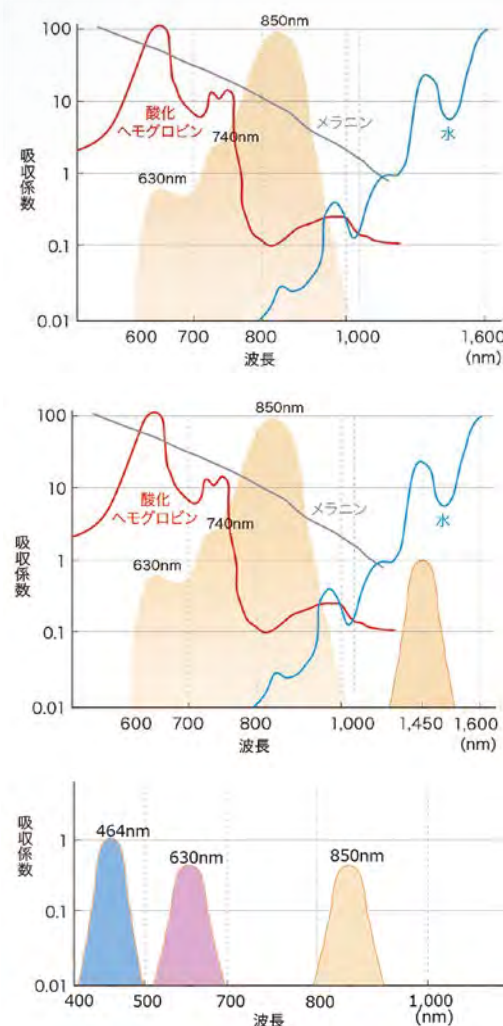

3 LED光源内蔵軽量プローブ

新たに開発したプローブは全て単体で光源を持ちます。従来の光伝達ファイバーがなくなり超軽量化仕様になりました。各プローブは症例、部位ごとに専用設計されており、それぞれ最適の照射面、光量にて照射できます。生体深達度と深達光量は従来機より大幅に増加しています。

LED光源と新型プローブによる深達性の進化!

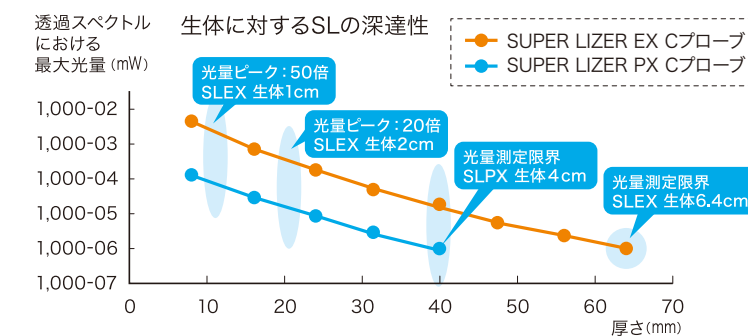

4 完全2チャンネル化を実現

完全に独立した2チャンネル方式により2名同時に個別のプローブ設定にて照射ができます。もちろんシンクロ機能にて1名に2本、最大4本のプローブで同時照射することも可能です。



2名の患者さまに別設定にて同時施行ができます。

