

待望
の登場！



動物用小型 スーパーライザー

—SUPER LIZER— *mini*

極限の
コンパクト
設計

高出力・
高性能は
そのままに

全ての
操作が
ラクチン設計

飼い主さんへの
レンタルサービスが
できる





なぜなら

飼い主さん、患者さんは 満足しています。



「スーパーライザー」は、注射針など痛みを伴う治療法ではなく、
心地よい温熱感があり高い治療効果が期待できる
先進の光線治療器だからです。

光線照射療法で、
幅広い動物の疾患に
使用されています。

適応と
思われる
疾患

整形外科的疾患

リウマチ、関節痛、腰痛、骨折
(メタルプレート使用中可)
後の疼痛、
椎間板ヘルニア等

皮膚疾患

皮膚潰瘍、口内炎、
外傷、外耳炎等

その他

排尿障害、食欲不振、鍼の代用
("ツボ"を用いた全身的な
さまざまな疾患に対しての
アプローチ)等


● 操作パネル

時間表示

照射時間を表示します。

出力設定ボタン 及び表示

ワンブッシュで
弱→中→強を繰り返します。

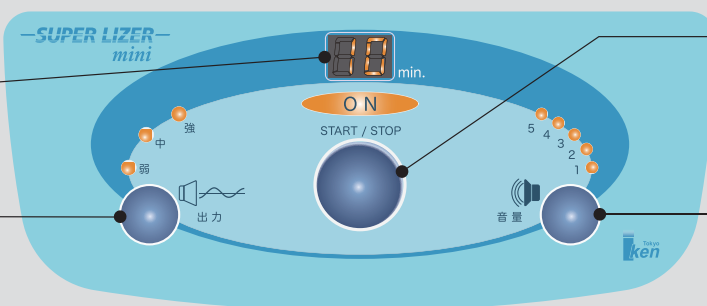

START/STOPボタン 及び照射時間

- 長押しで操作パネルが
点灯/消灯します。
- 短押しで赤外線が開始/
停止します。

音量設定ボタン 及び表示

ワンブッシュで
1→2→3→4→5→消灯を
繰り返します。

● 標準ユニット



プローブ

光源内蔵型の小型・軽量プローブの採用により、
さまざまな部位にストレスなく照射することが
できます。

● オプション



キャリングバッグ

スーパーライザーminiの専用キャリングバッグ
です。本体、照射用固定バンド、ACアダプター
を収納できます。往診用に最適です。

〈仕様〉

類別：機械器具12 理学診療用器具
一般的名称：赤外線治療器
医療機器分類：一般医療機器
使用目的：小動物(犬・猫・鳥)又は大動物(馬・牛)の患部を赤外線加熱し
温熱効果をもたらす
電気定格：AC 100V 0.34A 50/60Hz
本体定格：DC 12V 0.9A 11W
定格時間：10分
ランプ：ハロゲンランプ
分光放射率：5,000~13,000nmの波長域において60%以上
使用温度湿度：+10~+34℃、30~85%RH
保管温度湿度：-20~+60℃、10~95%RH
外形寸法：幅約290mm 高さ約110mm 奥行約255mm
重量：約2.2kg
付属品：取扱説明書
届出番号：29動薬第3585号



安全に関するご注意

● ご使用の前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

Tokyo ken 東京医研株式会社
URL <http://www.tokyoiken.co.jp>

本社/総務部・技術部 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
大 阪 工 場 〒570-0045 大阪府守口市南寺方中通 3-12-9
営 業 部 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-27-2
札幌支店 〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条 2-5-18
仙台支店 〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢 2-2-3
埼玉支店 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵 4-12-1
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-27-2
西 京 支 店 〒183-0005 東京都府中市若松町 4-3-6
横浜支店 〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉 4-3-17
名古屋支店 〒465-0014 愛知県名古屋市中区上管 2-1108-3F
大阪支店 〒570-0045 大阪府守口市南寺方中通 3-12-9
広島支店 〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東 2-14-30
四 国 支 店 〒761-1703 香川県高松市香川町浅野 332
福岡支店 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代 4-29-27・6F

TEL 042-378-6630
TEL 06-6995-6312
TEL 03-5807-3011
TEL 011-668-1113
TEL 022-773-3060
TEL 048-836-4100
TEL 03-5807-3013
TEL 042-352-3055
TEL 045-413-5103
TEL 052-726-8971
TEL 06-6995-6301
TEL 082-831-3616
TEL 087-815-5155
TEL 092-642-7288

お問い合わせ先