SUPER LIZER EX

左右アーム独立上下スライド機能

照射部位やベッドなどの 高さに合わせ、左右の アーム位置を上下に独立 して調整できます。 これによりジャストフィット な照射が可能になりま した。



大型前面収納ポケット

プローブや付属品を収納できる 大容量スペースを確保しました。







定格電圧:AC100V、定格周波数:50/60Hz、電源入力:207VA、出力波長:600nm~1,000nm、定格出力:Bプローブ2.0W・Cプローブ5.0W、 ■仕 様 SGプローブ1.0W・ライトパッド5.0W、光源:LED、本体重量:40kg、寸法:464mm(W)×464mm(D)×1,368mm(H)

■医療機器認証番号

303AGBZX00082000

消炎鎮痛等処置(器具等による療法):35点 ■算定診療 皮膚科光線療法(赤外線または紫外線療法):45点 報酬項目

SGプローブ



●ご使用の前に、「添付文書」「取扱説明書」を ●この機器には電気工事等が必要な場合があります。 よくお読みの上、正しくお使いください。 ●定期的に機器の点検を行ってください。

お買い求め販売店または当社支店へご相談ください。 工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

ken 東	京医研	林式会社 w.tokyoiken.co.jp		お問い合わせ先
本社/総務部·技術部	〒206-0802	東京都稲城市東長沼1131-1	TEL 042-378-6630	
営 業 部	〒113-0034	東京都文京区湯島 2-27-2	TEL 03-5807-3011	
仙台支店	〒981-3133	宮城県仙台市泉中央1-23-6トラストセンタービル3F	TEL 022-773-3060	
埼玉支店	₹337-0033	埼玉県さいたま市見沼区御蔵809-20	TEL 048-615-0800	
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島 2-27-2	TEL 03-5807-3013	
西東京支店	〒183-0005	東京都府中市若松町 4-3-6	TEL 042-352-3055	
横浜支店	〒221-0865	神奈川県横浜市神奈川区片倉 4-3-17	TEL 045-413-5103	
名古屋支店	₹465-0014	愛知県名古屋市名東区上菅 2-1108-3F	TEL 052-726-8971	
大阪支店	₹530-0047	大阪府大阪市北区西天満3-2-9 翁ビル2F	TEL 06-7223-8971	
中四国支店	〒731-0124	広島県広島市安佐南区大町東2-14-30	TEL 082-831-3616	
福 岡 支 店	₹812-0044	福岡県福岡市博多区千代 4-29-27-6F	TEL 092-642-7288	-



進化を遂げた究極型へ。LED スーパーライザー 誕生。

およそ四半世紀の歴史を持つ赤外線治療器 スーパーライザー。 現在まで約30.000台の納入実績を誇ります。 過去の知見と技術的研鑽をここに進化型として結実。 シリーズ初のLED光源と新波長を採用。 比類なき異次元の治療効果を発揮します。



J.

発光効率がよく全光束が多い高精度LEDは、 応答性に優れ、いかなる環境でも効果が安定 します。振動や衝撃に強く、紫外線がほとんど 出ない安全性も保持します。 新たに開発されたLEDプローブでは、生体内 で受け取る受光量を従来機の約5倍にする ことを可能としました。

40

600

700




光エネルギー総量と深達イメージ

水分・ヘモグロビン・メラニンによる

新波長帯を新たに採用

新たに600nm~1000nmの波長帯を採用しました。1000nm以上の波長 帯をカットし、純粋に生体深達性に優れる波長帯のみを照射できます。 この波長帯とLED光源とのマッチングにより火傷の危険性を回避しつつ 体内到達エネルギー量が大幅に増加させることに成功しました。

SLEX600~1.000nmの波長帯 吸収を極力回避できる波長帯 100 90 70 60 光 強 50 630nr

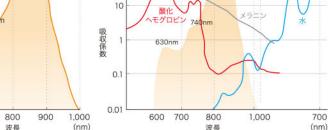

新開発 LED光源内蔵軽量プローブ

新たに開発したプローブは全て単体で光源を持ちます。 各プローブは症例、部位ごとに専用設計されており、 それぞれ最適の照射面、光量にて照射できます。



完全に独立した2チャンネル方式により2名同時に 個別のプローブ設定にて照射ができます。 もちろんシンクロ機能にて1名に2本、 最大4本のプローブで照射することも可能です。





目的に応じて選択できる多彩なプローブをご用意。/

EXプローブ オプション ラインナップ




定格出力:1.0W 重量:100g 手元ON/OFF機能

星状神経節照射に特に有効です。その他 ピンポイントのツボ刺激にも応用可能です。



定格出力:5.0W 重量:170g 手元ON/OFF機能

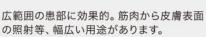





定格出力:5.0W 重量:170g 手元ON/OFF機能

背中や腹部など広い範囲への照射に有効的です。 LEDの光が均一に照射されしかもマイルドに作用 します。対象部位に近づくと自動でON、離れると 自動でOFFになる近接センサーも内蔵します。

関連品 オプション ラインナップ

