

—SUPER LIZER— mini

待望の
スーパーライザー小型器
登場!



〈特長〉

- ・コンパクト設計
- ・軽量プローブによりどんな部位にも照射がラク
- ・カンタンプッシュスイッチを採用し操作も容易




家庭での「痛み治療」が容易に行えるようになりました。

スーパーライザー miniは、低侵襲の赤外線治療器として多くの採用実績があるスーパーライザーシリーズの機能をそのまま集約した小型家庭用治療器です。光の中で最も深達性の高い波長帯(600nm~1,600nm)の光を1,800mWの高出力でスポット状に照射します。この光は心地よい温感とともに患部に到達し、温熱効果が期待できます。



■操作パネル

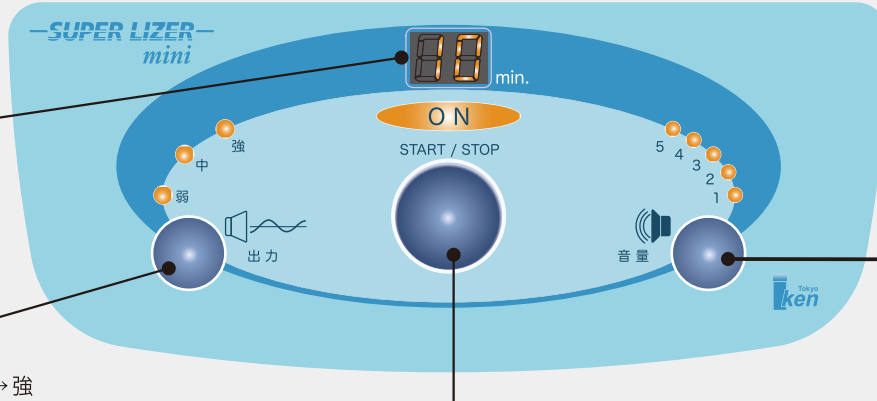

時間表示

照射の残り時間を表示します。

出力設定ボタン及び表示

押すたびに弱→中→強を繰り返します。

音量設定ボタン及び表示

押すたびに、1→2→3→4→5→消灯を繰り返します。

START/STOPボタン及び照射時間

・長押しで操作パネルが点灯/消灯します。
・短押しで赤外線が開始/停止します。

■標準ユニット



プローブ

光源内蔵型の小型・軽量プローブの採用により、さまざまな部位にストレスなく照射することができます。

■オプション



キャリングバッグ

スーパーライザー miniの専用キャリングバッグです。本体、照射用固定バンド、ACアダプターを収納できます。往診用に最適です。

〈仕様〉

類別：機械器具 78 家庭用電気治療器
一般的名称：家庭用赤外線治療器
医療機器分類：管理医療機器
使用目的/効能効果：赤外線加熱による温熱効果を目的とし一般家庭で使用する
電気定格：AC 100V 0.34A 50/60Hz
本体定格：DC 12V 0.9A 11W
定格時間：10分

ランプ：ハロゲンランプ
分光放射率：5,000~13,000nmの波長域において60%以上
使用温度湿度：+10~+34°C、30~85%RH
保管温度湿度：-20~+60°C、10~95%RH
外形寸法：幅約290mm 高さ約110mm 奥行約255mm
重量：約2.2kg
付属品：取扱説明書

医療機器製造販売認証番号：229AGBZX00108000



安全に関するご注意

●ご使用前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

ken 東京医研株式会社
URL <http://www.tokyoiken.co.jp>

本社/総務部・技術部	〒206-0802	東京都稲城市東長沼1131-1	TEL 042-378-6630
大阪工場	〒570-0045	大阪府守口市南寺方中通3-12-9	TEL 06-6995-6312
営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島2-27-2	TEL 03-5807-3011
札幌支店	〒063-0032	北海道札幌市西区西野2条2-5-18	TEL 011-668-1113
仙台支店	〒981-3137	宮城県仙台市泉区大沢2-2-3	TEL 022-773-3060
埼玉支店	〒336-0025	埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-1	TEL 048-836-4100
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島2-27-2	TEL 03-5807-3013
西東京支店	〒183-0005	東京都府中市若松町4-3-6	TEL 042-352-3055
横浜支店	〒221-0865	神奈川県横浜市神奈川区片倉4-3-17	TEL 045-413-5103
名古屋支店	〒465-0014	愛知県名古屋市長区上菅2-1108-3F	TEL 052-726-8971
大阪支店	〒570-0045	大阪府守口市南寺方中通3-12-9	TEL 06-6995-6301
広島支店	〒731-0124	広島県広島市安佐南区大町東2-14-30	TEL 082-831-3616
四国支店	〒761-1703	香川県高松市香川町浅野332	TEL 087-815-5155
福岡支店	〒812-0044	福岡県福岡市博多区千代4-29-27-6F	TEL 092-642-7288

お問い合わせ先